


⑥ 鬱血防止効果 プレスエア-

ウレタン

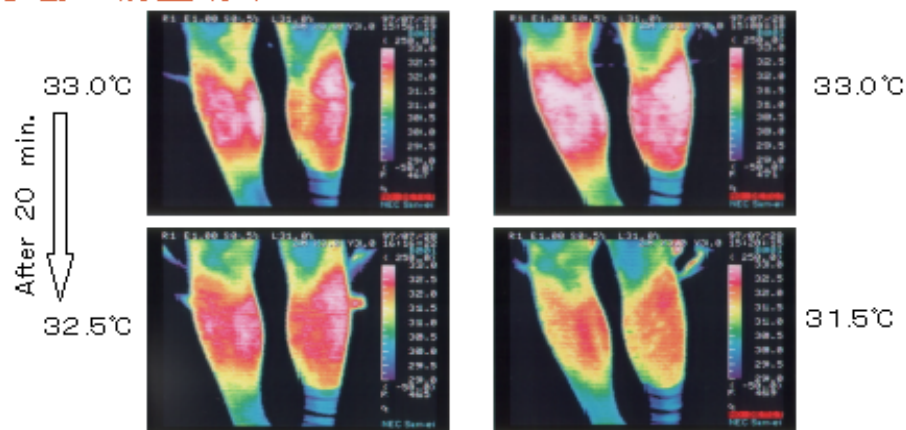


着座時の血流阻害がウレタンより少ない

TOYOBO


⑤ 体圧分散/寝姿勢

望ましい寝姿: 背面に空隙をつくらず、
床に寝たときの姿勢を保つ

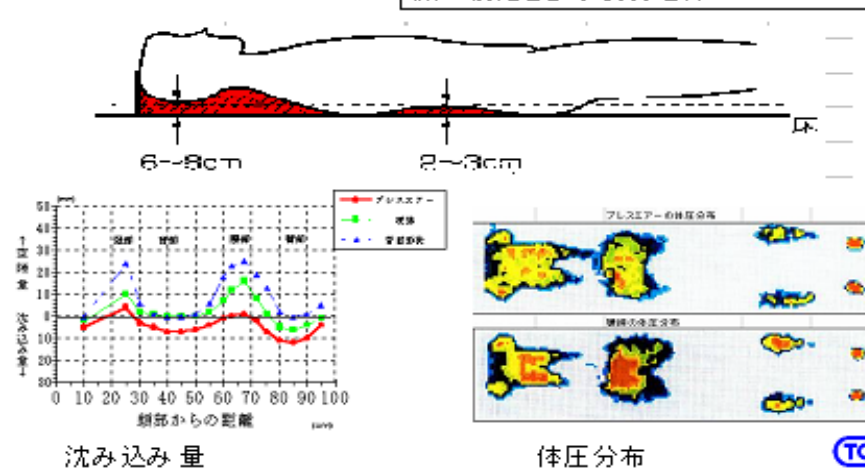

TOYOBO

通気度

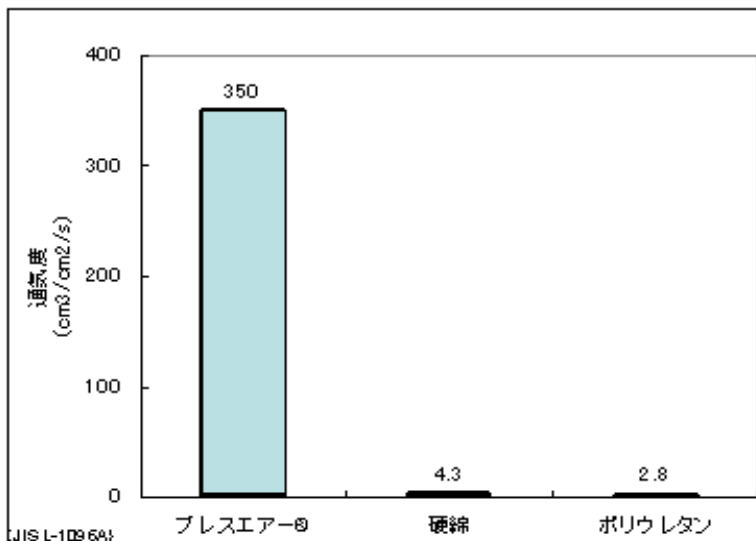

(JIS L-1096A)

BO


⑧ 抗菌性能

	黄色ブドウ球菌		肺炎桿菌		MRSA	
	生菌数	対数値	生菌数	対数値	生菌数	対数値
標準布 菌接種直後	25000	4.4	18000	4.3	24000	4.4
標準布 18時間培養後	8000000	6.9	3000000	7.5	4900000	6.7
増殖値	2.5		3.2		2.3	
プレスエア-® 18時間後	1300	3.1	700以下	2.8以下	700以下	2.8以下
殺菌活性値	1.3		1.5以上		1.6以上	

JIS L 1902 日本試験検査協会にて測定

TOYOBO

70℃圧縮残留歪測定法

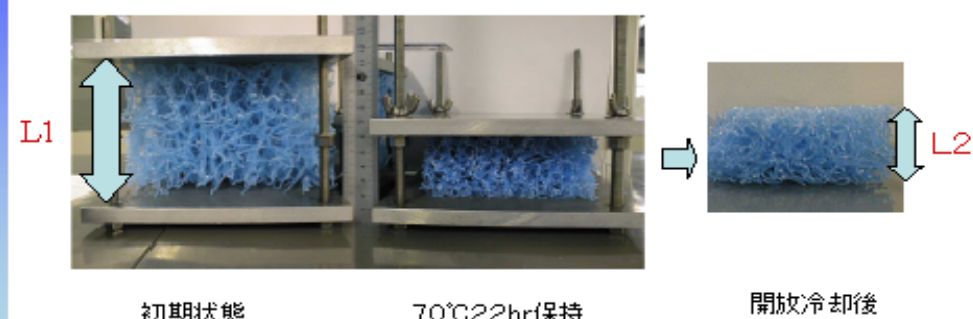


$$70^{\circ}\text{C圧縮残留歪}(\%) = 100 \times (L1 - L2) / L1$$

TOYOBO

Hタイプ
プレスエア-


優れた耐久性

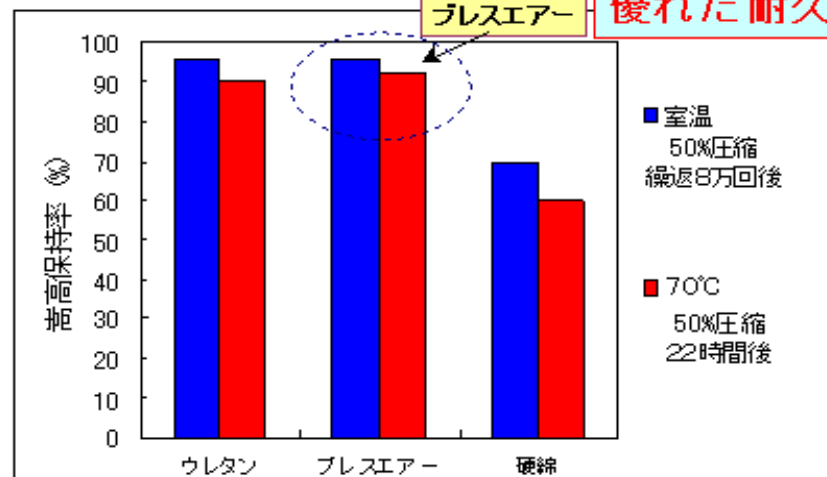

TOYOBO

④ 快適性能

寝床内の温湿度の経時変化
(寝床内気候: 湿度は低い方が望ましい)

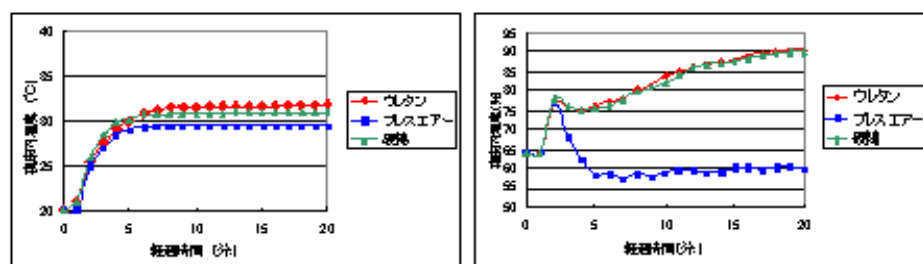

寝床内湿度を低く保ち 快適な寝床内気候に



TOYOBO

褥瘡予防対策品
(床ずれ防止予防品)

通気性マットレス

Pマット

●減圧●通気性●抗菌制菌

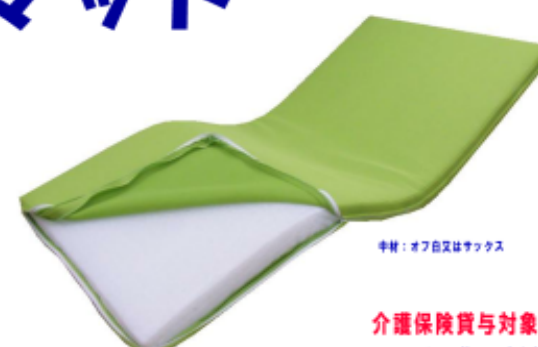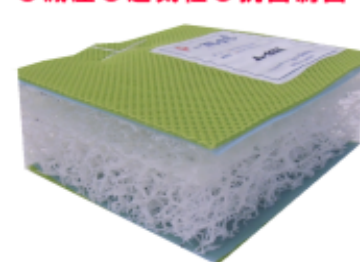

介護保険貨と対象品
シリアル番号で管理出来ます。

企画・製造元: 東シヤスランテ

3次元スプリング構造体 プレスエア-®

■介護保険貨と事業者よりレンタルが出来ます。

■施設・病院様に販売・リースが出来ます。